



ЭКРОС
группа компаний



КАТАЛОГ 2025

ДОЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
И НАКОНЕЧНИКИ



ОДНОКАНАЛЬНЫЕ И МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

- Поршневой механизм пипеток ЭКОХИМ обеспечивает плавный ход и высокую воспроизводимость дозирования.
- Сбрасыватель обеспечивает лёгкий сброс наконечников.
- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство и простоту в использовании.
- Объём дозирования отображается на цифровом дисплее. Все дозаторы легко разбираются для профилактического обслуживания.
- Посадочные конуса для надевания наконечников изготовлены из ударо- и химически стойких материалов и у всех дозаторов являются полностью автоклавируемыми.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие глубокие сосуды.
- Функциональность и простота в обращении позволяют самостоятельно откалибровать дозаторы.
- Небольшой вес дозаторов позволяет снизить постоянное физическое напряжение возникающее на кисти руки в процессе работы лаборанта.
- Держатель наконечников в многоканальных дозаторах легко поворачивается в пределах 360° что позволяет удобно адаптировать его положение к любому рабочему месту лаборанта.

Дозаторы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и имеют медицинское регистрационное удостоверение. Все дозаторы проходят обязательную первичную поверку и сопровождаются гарантийным и послегарантийным обслуживанием.

Дозаторы также сертифицированы на территории Беларуси и Казахстана.



ДОЗАТОРЫ «ЭКОХИМ»


ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ:

- МИКРОБИОЛОГИИ
- ИММУНОЛОГИИ
- БИОХИМИИ
- ГЕНЕТИКИ
- АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ И МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

СЕРИЯ ЭКОХИМ

Дозаторы серии «ЭКОХИМ» Широкий модельный ряд. Каждая модель представлена в двух вариантах – частично и полностью автоклавируемый вариант дозатора. Установка объёма со щелчком.

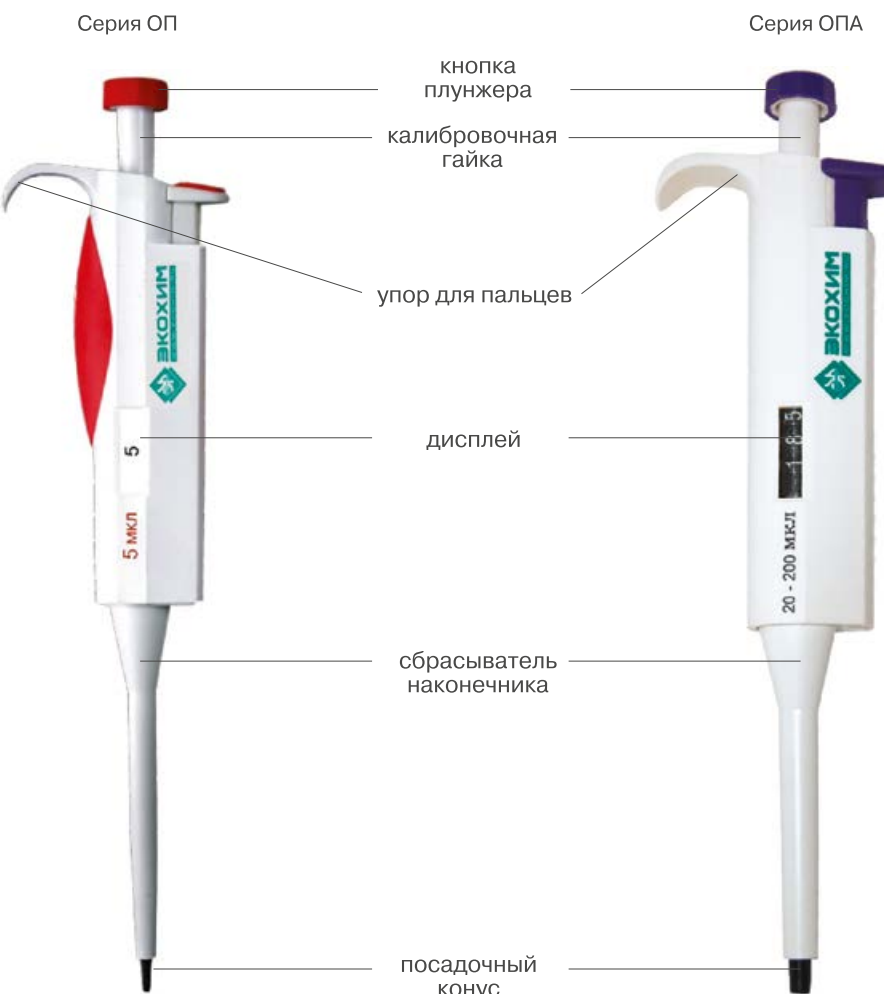

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ И МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

Технические характеристики

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЁМА ЭКОХИМ (ЧАСТИЧНО И ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Название дозатора	Цвет	Дискретность установки дозы, мкл	Тестируемый объём, мкл	Точность, %, ±	СКО, %	Наконечники ЭКРОСХИМ
ЭКОХИМ-ОП-1-0,5-10	красный	0,1	0,5-10	±8.....2,5	7.....3	10, 20 мкл; 10 мкл с фильтром; 20 мкл с фильтром
ЭКОХИМ-ОП-1-0,5-10-А	красный	0,1	0,5-10	±8.....2,5	7.....3	
ЭКОХИМ-ОП-1-2-20	красный	0,1	2,0 – 20,0	±8.....2	6.....3	
ЭКОХИМ-ОП-1-2-20-А	красный	0,1	2,0 – 20,0	±8.....2	6.....3	
ЭКОХИМ-ОП-1-5-50	желтый	0,5	5,0 – 50,0	±5.....2	5.....2,5	200 мкл без фильтра; 250 мкл; 300 мкл, 100 мкл с фильтром
ЭКОХИМ-ОП-1-5-50-А	желтый	0,5	5,0 – 50,0	±5.....2	5.....2,5	
ЭКОХИМ-ОП-1-10-100	синий	0,5	10,0 – 100,0	±2,5.....1,5	3.....2	300 мкл; 100 мкл с фильтром; 200 мкл с фильтром; 200 мкл без фильтра; 250 мкл
ЭКОХИМ-ОП-1-10-100-А	синий	0,5	10,0 – 100,0	± 2,5.....1,5	3.....2	
ЭКОХИМ-ОП-1-20-200	синий	1,0	20,0 – 200,0	±2.....1,5	3.....2	
ЭКОХИМ-ОП-1-20-200-А	синий	1,0	20,0 – 200,0	±2.....1,5	3.....2	
ЭКОХИМ-ОП-1-100-1000	оранжевый	5,0	100,0 – 1000,0	±1,5.....1	2.....1	1000 мкл; 1000 мкл с фильтром
ЭКОХИМ-ОП-1-100-1000-А	оранжевый	5,0	100,0 – 1000,0	±1,5.....1	2.....1	
ЭКОХИМ-ОП-1-500-5000	зеленый	50,0	500,0 – 5000,0	±1.....1	1.....1	5000 мкл
ЭКОХИМ-ОП-1-500-5000-А	зеленый	50,0	500,0 – 5000,0	±1.....1	1.....1	
ЭКОХИМ-ОП-1-1000-10000	зеленый	100,0	1000,0 – 10000,0	±1.....1	1.....1	10000 мкл
ЭКОХИМ-ОП-1-1000-10000-А	зеленый	100,0	1000,0 – 10000,0	±1.....1	1.....1	

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЁМА ЭКОХИМ (ЧАСТИЧНО И ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Название дозатора	Цвет	Тестируемый объём, мкл	Точность, %, ±	СКО, %	Наконечники ЭКРОСХИМ
ЭКОХИМ-ОФ-1-5	красный	5,0	± 5	5	200 мкл без фильтра; 250 мкл; 300 мкл; 100 мкл с фильтром
ЭКОХИМ-ОФ-1-5-А	красный	5,0	± 5	5	
ЭКОХИМ-ОФ-1-10	красный	10,0	± 2,5	3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-10-А	красный	10,0	± 2,5	3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-20	красный	20,0	± 2	3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-20-А	красный	20,0	± 2	3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-25	красный	25,0	± 2	3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-25-А	красный	25,0	± 2	3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-50	синий	50,0	± 2	2	200 мкл без фильтра; 250 мкл; 300 мкл; 100 мкл с фильтром; 200 мкл с фильтром
ЭКОХИМ-ОФ-1-50-А	синий	50,0	± 2	2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-100	фиолетовый	100,0	± 1,5	2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-100-А	фиолетовый	100,0	± 1,5	2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-200	фиолетовый	200,0	± 1,5	2	1000 мкл; 1000 мкл с фильтром
ЭКОХИМ-ОФ-1-200-А	фиолетовый	200,0	± 1,5	2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-250	оранжевый	250,0	± 1,5	2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-250-А	оранжевый	250,0	± 1,5	2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-500	оранжевый	500,0	± 1	1	
ЭКОХИМ-ОФ-1-500-А	оранжевый	500,0	± 1	1	
ЭКОХИМ-ОФ-1-1000	зеленый	1000,0	± 1	1	
ЭКОХИМ-ОФ-1-1000-А	зеленый	1000,0	± 1	1	
ЭКОХИМ-ОФ-1-2000	зеленый	2000,0	± 1	1	5000 мкл
ЭКОХИМ-ОФ-1-2000-А	зеленый	2000,0	± 1	1	
ЭКОХИМ-ОФ-1-5000	зеленый	5000,0	± 1	1	
ЭКОХИМ-ОФ-1-5000-А	зеленый	5000,0	± 1	1	
ЭКОХИМ-ОФ-1-10000	зеленый	10000,0	± 1	1	10000 мкл
ЭКОХИМ-ОФ-1-10000-А	зеленый	10000,0	± 1	1	

ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ И ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ЭКОХИМ (ЧАСТИЧНО АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Название дозатора	Цвет	Дискретность установки дозы, мкл	Тестируемый объём, мкл	Точность, %, ±	СКО, %	Наконечники
ЭКОХИМ-МП-8-0,5-10	красный	0,1	0,5-10	±8.....2,5	7.....3	10, 20 мкл; 10 мкл с фильтром; 20 мкл с фильтром
ЭКОХИМ-МП-8-5-50	желтый	0,5	5,0 – 50,0	±5.....2	5.....2,5	100 мкл с фильтром; 200 мкл с фильтром; 200 мкл без фильтра; 250, 300 мкл
ЭКОХИМ-МП-8-10-100	синий	0,5	10,0 – 100,0	±2,5.....1,5	3.....2	300, 350 мкл
ЭКОХИМ-МП-8-30-300	оранжевый	1,0	30,0 – 300,0	±2.....1,2	2,6.....1,8	
ЭКОХИМ-МП-12-0,5-10	красный	0,1	0,5-10	±8.....2,5	7.....3	10, 20 мкл; 10 мкл с фильтром; 20 мкл с фильтром
ЭКОХИМ-МП-12-5-50	желтый	0,5	5,0 – 50,0	±5.....2	5.....2,5	100 мкл с фильтром; 200 мкл с фильтром; 200 мкл без фильтра; 250, 300 мкл
ЭКОХИМ-МП-12-10-100	синий	0,5	10,0 – 100,0	±2,5.....1,5	3.....2	
ЭКОХИМ-МП-12-30-300	оранжевый	1,0	30,0 – 300,0	±2.....1,2	2,6.....1,8	

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ

Наконечники для дозаторов предназначены для отбора и переноса жидкостей с помощью пипеточного дозатора. Выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества. Наконечники можно автокла-вировать (при температуре 121°С и давлении 1атм, в течение 15-20 мин).
Регистрационное удостоверение на наконечники для дозаторов № РЗН 2022/16938 от 14.03.2024 г. Внесены в реестр МИНПРОМТОРГ.



Объем, мкл	Вид	Дозируемый объем, мкл	Диаметр посадочного конуса наружный/внутренний, мм	Длина, мм	Упаковка	Код
10	без фильтра	0,1–10	6,0/4,4	31,3	1000 шт./уп.	1.75.30.30.0090
	без фильтра, в штативе				1 x 96 шт. в штативе	1.75.30.30.0090Ш
	с фильтром	0,5–10			1000 шт./уп.	1.75.30.30.1010
	с фильтром, в штативе	0,1–10			1 x 96 шт. в штативе	1.75.30.30.1010Ш.1
20	без фильтра	2-20	6,0/4,0	45,7	1000 шт./уп.	1.75.30.30.0102
	без фильтра, в штативе				1 x 96 шт. в штативе	1.75.30.30.0102Ш
	с фильтром				1000 шт./уп.	1.75.30.30.1009
	с фильтром, в штативе				1 x 96 шт. в штативе	1.75.30.30.1009Ш
100	с фильтром	2-100	7,4/5,5	53	1000 шт./уп.	1.75.30.30.1011
	с фильтром, в штативе				1 x 96 шт. в штативе	1.75.30.30.1011Ш
200	без фильтра	2–200	7,4/5,5	53	1000 шт./уп.	1.75.30.30.0100
	без фильтра, в штативе				1 x 96 шт. в штативе	1.75.30.30.0100Ш
	с фильтром				1000 шт./уп.	1.75.30.30.1020
	с фильтром, в штативе				1 x 96 шт. в штативе	1.75.30.30.1020Ш.1
250	без фильтра	0,5–250	7,4/5,5	53	1000 шт./уп.	1.75.30.30.0101
300	без фильтра	5–300	7,4/5,5	53	500 шт./уп.	1.75.30.30.0093.5
					1000 шт./уп.	1.75.30.30.0093
	без фильтра, в штативе				1 x 96 шт. в штативе	1.75.30.30.0093Ш
1000	без фильтра	100–1000	8,75/7,5	83	500 шт./уп.	1.75.30.30.0099
	без фильтра, в штативе				1000 шт./уп.	1.75.30.30.0096
	с фильтром				1 x 96 шт. в штативе	1.75.30.30.0097Ш
	с фильтром, в штативе				1000 шт./уп.	1.75.30.30.1030
5000*	без фильтра	500–5000	15,4/13,3	119,75	100 шт./уп.	1.75.30.30.0095
10 000**	без фильтра	1000–10 000	18,5/16,0	150	40 шт./уп.	1.75.30.30.0140
					100 шт./уп.	1.75.30.30.0094

* подходят к дозаторам Biohit (Сарториус), Экохим (ЭКРОСХИМ).
** подходят к дозаторам ТермоФишер (Ленпипет), Экохим (ЭКРОСХИМ).

ШТАТИВЫ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Пластиковые вертикальные стойки-держатели, применяются для хранения дозатора в вертикальном положении, когда дозатор не используется. Выпускаются в двух вариантах: на 4, на 6 посадочных мест.



ШТАТИВЫ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Предназначены для хранения наконечников к дозаторам. Материал полипропилен. Автоклавируется при температуре +121°C.



Штатив для наконечников

1000 мкл, 96 гнезд ПП код по каталогу 1.75.30.30.0096.ШН
Подходит для наконечников 1000 мкл производства ЭКРОСХИМ



Штатив для наконечников

100/200/250/300 мкл, 96 гнезд ПП код по каталогу 1.75.30.30.0093.ШН
Подходит для наконечников 100 мкл, 200 мкл, 250 мкл, 300 мкл производства ЭКРОСХИМ

Автоматический дозатор «Э-пипет». С зарядным устройством

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Автоматический дозатор является электрическим мини-насосом для работы со стеклянными или пластиковыми пипетками объемом от 0,1 мл до 100 мл.

Он позволяет набирать и вытаскивать жидкость из наконечника, используя соответствующие кнопки.

ОСОБЕННОСТИ:

- Использование стеклянных и пластиковых пипеток объемом от 0,1 до 100 мл.
- Фиксатор оснащен гидрофобным защитным тефлоновым (PTFE) фильтром с размером ячеек 0,2 мкм, который предотвращает попадание ЖИДКОСТИ в дозатор.
- Насечки внутри фиксатора способствуют плотной установке даже мокрых пипеток.
- Высокая скорость забора и дозирования жидкости экономит время.
- Инновационный регулятор скорости. Трёхпозиционный переключатель. Скорость набора жидкости регулируется силой нажатия кнопок на ручке (чем сильнее нажатие, тем быстрее забор жидкости).
- Непрерывная работа без подзарядки в течение 10 часов.



- Возможность работы во время зарядки.
- Фиксатор пипеток и держатель для фильтра автоклавируются.
- Дозатор оборудован индикатором состояния зарядки батареи на корпусе в виде красной лампочки, которая загорается, если аккумулятор разряжен.



ДИСПЕНСЕРЫ ЭКРОС (С РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ)

ПЭ КРОС
РИБОРЫ

Это новое поколение высококачественных и надёжных диспенсеров. Уникальные особенности наших диспенсеров позволяют использовать их с широким рядом реагентов и обеспечивают высокую точность. Диспенсер оснащён рециркуляционным клапаном для перенаправления жидкости в бутылку, что препятствует образованию пузырей воздуха и позволяет осуществлять дозирование без потери реагента. Особое внимание при разработке диспенсеров было уделено обеспечению ровного и мягкого хода поршня, а также удобству при работе в сложных лабораторных условиях.

Диспенсеры серии HF разработаны с использованием химически стойких материалов, используемых для работы с ПЛАВИКОВОЙ КИСЛОТОЙ (HF) и другими агрессивными химическими веществами.

Диспенсеры серии HF осуществляют дозирование высокочистых веществ с высокой точностью, не выделяют ионов металлов. Это позволяет использовать диспенсеры для следового анализа.

Серия HF



ОСОБЕННОСТИ:

6 ОБЪЁМОВ ДОЗИРОВАНИЯ:


- 0.25 – 2.5 мл
- 0.5 – 5 мл
- 1 – 10 мл
- 2.5 – 30 мл
- 5 – 60 мл
- 10 – 100 мл

Диспенсер автоклавируется полностью при 121° С и давлении 1 атм. в течение 10-15 минут



РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИБКИЙ СЛИВ

Регулируемый гибкий слив способствует удобному дозированию в любых лабораторных условиях.

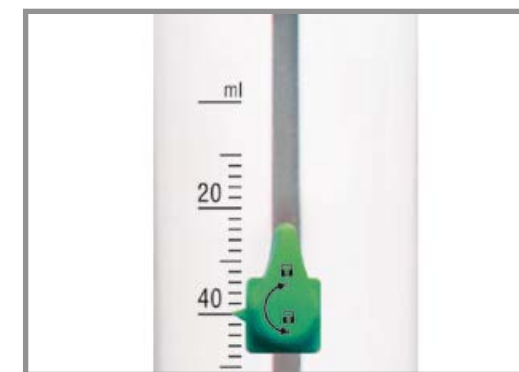

ФИКСАТОР УСТАНОВЛИВАЕМОГО ОБЪЁМА

Фиксация объёма при повороте на 180°.



ПОВОРОТ НА 360 ГРАДУСОВ

Специально разработанные адаптеры с поворотом на 360 градусов (возможность поворота нижней части диспенсера на 360°)



БЕСПРУЖИННЫЙ КЛАПАН

Специально разработанный беспружинный клапан, изготовленный из фторопласта, гарантирует высокую химическую стойкость и бесперебойную работу.



УНИКАЛЬНЫЙ ПОРШЕНЬ

Поршень, изготовленный из фторопласта, с О-образным кольцом обеспечивает повышенную химическую стойкость и плавный ход.



АДАПТЕРЫ

В стандартную комплектацию входят адаптеры для разных видов бутылей с размерами горловин: 28, 30, 32, 36, 40 и 45 мм.



ООО «ЭКРОСХИМ»
Производство, оптовые
и розничные продажи

+7 (812) 322-96-00
+7 (495) 363-00-61
E-mail: info@ecohim.ru
www.ecohim.ru

